

MEDLANCE[®]

Автоматические ланцеты (скарификаторы) *plus*

Производитель: HTL-STREFA, Польша

Безопасность и комфорт на первом месте

Линейка автоматических скарификаторов (ланцетов)

Medlance plus («Медланс плюс») представлена

комплектами:


- **Lite** («Лайт»)
- **Universal** («Универсал»)
- **Extra** («Экстра»)
- **Special** («Специал»)



Одноразовые стерильные ланцеты для забора капли крови это, прежде всего, безопасность, надежность и комфорт.

Безопасность и комфорт на первом месте

- Автоматические ланцеты «Медланс плюс» имеют ультратонкую иглу, максимально легко проникающую в кожу.
- Благодаря линейному проколу устраняются колебания, что способствует уменьшению боли и предотвращает повреждение тканей.
- Скарифikator «Медланс плюс» гарантирует безболезненный и удобный контакт с участком прокола.

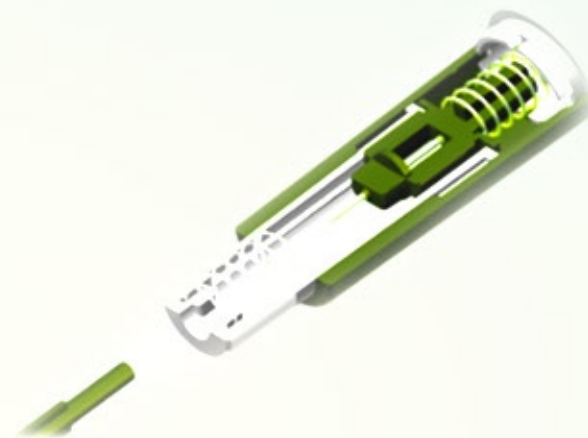

Безопасность и комфорт на первом месте

➤ Прост в обращении

Скарификатор «Медланс плюс» это современный, безопасный ланцет эргономичной формы с надежным механизмом активации, не требующим предварительной загрузки, с помощью которого взять образец крови можно намного проще, чем раньше.

➤ Эффективный

Ланцет «Медланс плюс» имеет особый технический дизайн, который гарантирует достаточный кровоток почти безболезненно.

➤ Безопасный

Ланцет «Медланс плюс» – это одноразовый, саморазрушающийся инструмент, который не может быть использован вторично. Игла «Медланс плюс» находится внутри прибора до и после использования, предупреждая тем самым возникновение острых повреждений. Автоматические ланцеты «Медланс плюс» простерилизованы под воздействием 25 килогрэй.

Индивидуальный подход

Продукт	Игла / Ширина пера	Глубина прокола	Цвет
Медланс Плюс Лайт Идеальны для контроля уровня сахара в крови	Игла 25G	1,5 мм.	фиолетовый
Медланс Плюс Универсал Идеальны в тех случаях, когда вам необходим большой образец крови	Игла 21G	1,8 мм.	синий
Медланс Плюс Экстра Кожа пациента слишком грубая? Нужен большой образец крови? Используйте эти ланцеты и соберите более 10µl	Игла 21G	2,4 мм.	зеленый
Медланс Плюс Специал Идеальны для забора крови из пятки у младенцев и из пальца у взрослых.	Лезвие 0,8 мм.	2,0 мм.	желтый



Инструкция по использованию



1. Открутите фиолетовый (голубой, зеленый или желтый) защитный колпачок и извлеките его.



2. Для начала работы плотно приложите корпус прибора к месту прокола.



3. Мягко нажимая на место прокола, возьмите необходимое количество крови.

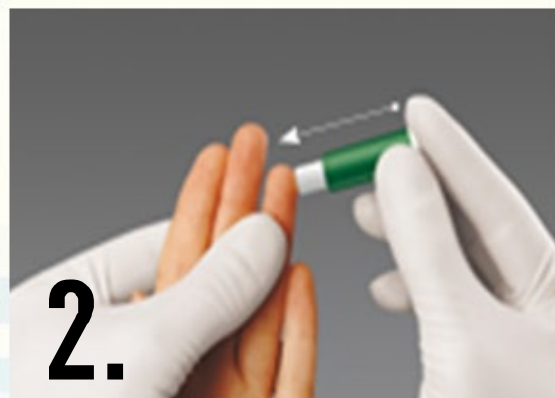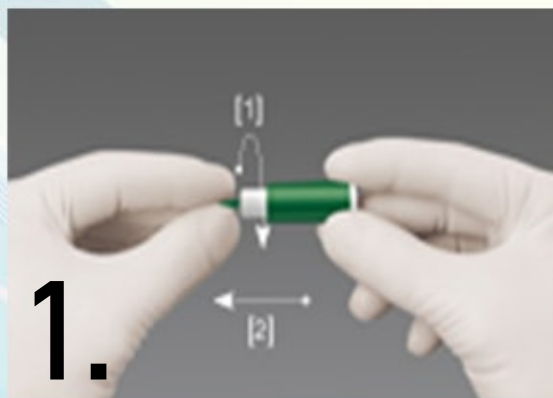

По вопросам оптовых закупок:

ООО «ОПТ–ММОЛ»

Адрес:

125493, г. Москва, ул. Авангардная, д.3, офис 1507

Телефоны:

+7 495 221 6951

+7 495 730 5261

+7 495 730 5262

ОПТ  ММОЛ

<http://opt-mmol.com>
office@opt-mmol.ru

Благодарим за внимание!

По всем интересующим вопросам для вас работает бесплатная горячая линия для всех регионов РФ

+7 800 555 48 00